

Массажное кресло

Инструкция по эксплуатации



Спасибо, что выбрали нашу продукцию для массажа. Это массажное кресло использует эргономичный дизайн для массажа головы, шеи, спины, талии, ягодиц, ног, ступней, рук и других частей тела с использованием различных методов массажа, включая теплые компрессы, воздушный массаж, разминающий массаж и другие функции. Это роскошное массажное кресло высокого класса. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и уделите особое внимание мерам безопасности, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию и использование этого продукта. Сохраните руководство для дальнейшего использования

Каталог

- I. Характеристики устройства
- II. Наименования компонентов
- III. Использование
- IV. Технические параметры
- V. Уход и обслуживание
- VI. Вопросы, требующие внимания
- VII. Защита
- VIII. Полезные советы
- IX. Названия и содержание вредных веществ в продуктах
- X. Инструкции по гарантии продукта
- XI. Гарантийный талон на послепродажное обслуживание
- XII. Анализ и устранение распространенных неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Звук (рабочий звук): Звук надувания воздушных подушек Звук спуска воздуха из воздушных подушек Звук переключения на соленоидный клапан Звук работы воздушного насоса	Звук, производимый устройством во время работы. Звук механической работы.	Этот звук нормален. Не требует вмешательства.
Устройство полностью не работает	* Вилка питания не вставлена в розетку. * Выключатель розетки не включен. * Кнопка массажа не нажата.	Проверьте вилку и розетку, убедитесь, что вилка хорошо контактирует с розеткой, нажмите кнопку массажа.
Массаж неожиданно остановился в процессе	Это устройство только что завершило 15 минут работы и автоматически перешел в режим ожидания.	Если вы хотите продолжить массаж, сделайте это снова. Нажмите кнопку питания, чтобы включить массаж.
	Защита от перегрева для двигателей, превышающих расчетное время работы.	Выключите питание. Дайте устройству постоять в выключенном состоянии 15 минут.

*Компания оставляет за собой право улучшать продукцию и инструкции. Если изменения производятся без уведомления, внешний вид продукта должен соответствовать фактическому объекту.

*Этот том был тщательно проверен, но это не исключает возможности опечаток или недоразумений в содержании. Мы с сожалением сообщаем вам, что оставляем за собой право на толкование.

Неправильная утилизация отходов вызывает загрязнение окружающей среды.

Сертификат соответствия

Имя: _____ Модель №: _____

Номер инспекции: _____ Дата производства: _____

XI. Гарантийный талон на послепродажное обслуживание

Гарантийный талон

С этим талоном гарантия на один год, пользователи должны хранить его в надлежащем виде

Пользователь	
ID покупателя:	_____
Заказ №:	_____
Продукт:	_____
№ Модели:	_____
Магазин	_____
Дата:	_____ Цена: _____
Имя пользователя:	_____
Телефон:	_____
Адрес:	_____
_____	_____

Гарантийный талон

С этим талоном гарантия на один год, пользователи должны хранить его в надлежащем виде

Компания	
ID покупателя:	_____
Заказ №:	_____
Продукт:	_____
№ Модели:	_____
Магазин	_____
Дата:	_____ Цена: _____
Имя пользователя:	_____
Телефон:	_____
Адрес	_____
_____	_____

Запись о техническом обслуживании

Дата	Состояние неисправности	Адрес	Результат

I. Характеристики устройства

- Все устройство имеет элегантные линии, яркие цвета, гуманизированный дизайн и экологическую защиту.
- Это устройство оснащено двумя наборами движений и восемью массажными головками, которые могут разминать и массировать шею, спину и талию человека.
- Все устройство оснащено около 20 воздушными подушками для ступней, ног, рук, подушки, плеч и головы, которые могут выполнять функцию воздушного массажа под давлением.
- Возможность ручной настройки движений массажа шеи, спины и талии, множество массажных техник, свободное преобразование и реализация четырехступенчатой регулировки.
- Одна кнопка для включения массажа воздушных подушек, ручная настройка массажа для рук и ног, интенсивность массажа регулируется в трех уровнях.
- Угол наклона спинки можно регулировать в диапазоне от 115° до 155°. При настройке спинки в самое низкое положение возможно достижение функции нулевой гравитации.
- Одна кнопка для нагрева, постоянная температура 35°C ~ 45°C.
- Время массажа можно настроить в соответствии с потребностями. Время сеанса может быть установлено на 15, 20, 25 или 30 минут с шагом изменения в 5 минут.

II. Наименование компонентов



Установка, не требующая сборки

Нет необходимости в сложных операциях по установке, достаточно просто открыть коробку.

1. Метод установки соединительного кабеля



Рисунок 1

Подключите вилку шнура питания к разъему электрического блока (как показано на рисунке 1), а другой конец подключите к розетке.

2. Метод перемещения массажного кресла



- Наклоните кресло назад на 40° для облегчения перемещения массажного кресла в помещении.
- Не нажимайте слишком сильно вниз, чтобы избежать повреждения корпуса кресла из-за его полного разрушения.
- Пожалуйста, не перемещайте кресло, когда кто-то на нем сидит.
- Следует учитывать, что массажная подушка может быть повреждена, если продукт лежит на полу.

IX. Наименования и содержание вредных веществ в продуктах

Название части	Опасные вещества					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Печатная плата	X	○	○	○	○	○
Кожаное покрытие	○	○	○	○	○	○
Соединительный кабель	○	○	○	○	○	○
Электромеханизм	X	○	○	○	○	○
Наполнитель	○	○	○	○	○	○
Упаковочные материалы	○	○	○	○	○	○
Металлический каркас	X	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	X	○	○	○	○	○

Этот документ подготовлен в соответствии с SJ/T 11364.
 ○ Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех основных материалах компонента ниже предельных требований, установленных в GB/T 26572.
 X Указывает на то, что содержание опасного вещества в хотя бы одном среднем материале компонента превышает предельные требования, установленные в GB/T 26572.

Вредные вещества, указанные в этой таблице, не причинят вреда человеческому организму и окружающей среде при нормальном использовании продукта. Опасные вещества, указанные в таблице, и их существующие компоненты предоставляют потребителям и специалистам по переработке информацию о наличии соответствующих веществ, что помогает правильно утилизировать продукты при их выбросе.

Рекомендации по правилам утилизации электронных отходов и обращению с отходами электрических приборов

Компания выступает за защиту окружающей среды и низкоуглеродное потребление. Рекомендуется, чтобы пользователи, владеющие продуктом, соблюдали национальные законы и правила по утилизации электрических и электронных отходов, когда они больше не нуждаются в продукте, и передавали его местным производителям с национально признанной квалификацией для переработки, чтобы сократить отходы ресурсов и защитить естественную окружающую среду Земли.

X. Инструкции по гарантии продукта

1. В целях защиты интересов потребителей наши продукты строго соответствуют правилам «трех пакетов» (трех видов бесплатного обслуживания) государства. Потребители могут воспользоваться годовой гарантией. Если продукт поврежден из-за проблем с качеством в течение гарантийного срока, компания может бесплатно отремонтировать и заменить запасные части.

2. В течение гарантийного срока компания может взимать стоимость материалов, если обслуживание требуется из-за неисправности, вызванной следующими обстоятельствами:

- Неправильное использование или ремонт самостоятельно;
- Пользователи, не соблюдающие предписанное напряжение питания;
- Самостоятельное перемещение, транспортировка или модификация после установки;
- Продукт, который стал естественно грязным в процессе использования;
- Повреждения, вызванные природными и техногенными катастрофами, а также вредителями.

3. В следующих случаях компания взимает плату за обслуживание:

- По истечении гарантийного срока;
- Отсутствии гарантийного талона.

Внимание

- Массажное кресло предназначено только для использования в помещении.
- Используйте массажное кресло при низкой температуре в помещении, не изменяйте резко температуру. Рекомендуется постепенно регулировать температуру до нормального диапазона перед использованием.
- Если массажное кресло перемещено из холодного помещения для хранения в теплое для использования, это может повлиять на нормальную работу устройства из-за накопления влаги в деталях или вызвать отказ деталей. Рекомендуется перед использованием оставить продукт при комнатной температуре в течение 1 часа.

VIII. Полезные советы


- Перед использованием массажного кресла питание должно быть включено.
- Дети должны использовать это кресло только под присмотром взрослых, чтобы избежать травм и неправильного использования оборудования.
- Пожалуйста, не позволяйте детям подниматься на это кресло, чтобы избежать падения.
- Используйте массажное кресло для регулировки силы массажа, так как массажная сила слишком мала для игры или недостаточно сильна, что может привести к усталости, повреждению кожи, мышц или даже поломке массажера. Начинать с легкого массажа и постепенно увеличивайте интенсивность.
- Используйте массажное кресло для расслабления тела и ума. В дополнение к размышлениям дома и в спальне, вы должны быть спокойны и расслаблены.
- Массажные кресла не подходят для пациентов с сердечными заболеваниями, гипертонией, остеопорозом, кожными повреждениями, язвами, кровотечениями, опухолями, а также для тех, кто голоден, болен, пьян и т.д.
- Чтобы избежать снижения эффективности массажа или травм, не используйте массажное кресло вместе с другим эффективным оборудованием, таким как электрическое одеяло.
- Не используйте массажное кресло в течение одного часа после еды, чтобы избежать негативных последствий.
- Не используйте массажное кресло мокрыми руками или частями тела. Не тяните за шнур питания и не отключайте его во время работы.
- Не размещайте на кресле предметы или вещества, которые могут вызвать электрический шок, сбой в работе или пожар.
- Если вы испытываете дискомфорт во время массажа, немедленно прекратите его.
- Если продукт не используется для самодиагностики или лечения и нуждается в диагностике или лечении, его должен осмотреть квалифицированный медицинский персонал.
- Не используйте это кресло, если вы находитесь в состоянии беременности или имеете физиологические проблемы.
- Используйте кресло для массажа с таймером, 15 минут на каждый массаж, не более получаса для каждого сеанса. Если продукт используется в течение длительного времени, включается защита от перегрева, и прибор автоматически выключается.
- Если работа прибора остановилась, пользователи, не привыкшие к тепловому воздействию, должны быть осторожны при его повторном включении.
- Не позволяйте массажному креслу прикасаться к следующим частям тела: колено, грудь, живот и т. д.

Исключено для массажного кресла:

В случае стихийных бедствий, таких как наводнение или пожар, особое внимание должно быть уделено предотвращению травм из-за электрического удара во время эвакуации.

- В случае любого из следующих условий, немедленно выключите питание, отключите прибор от источника питания и свяжитесь с нашей компанией:
 - Массажное кресло случайно пролилось или произошло что-то подобное, что может вызвать электрический шок.
 - Одежда или другие предметы застряли в массажном кресле и внутренние детали обнажены.
 - Если вы испытываете боль или сильный дискомфорт во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
 - Если в приборе обнаружены неисправности, необычные звуки или поломка.

IV. Технические параметры

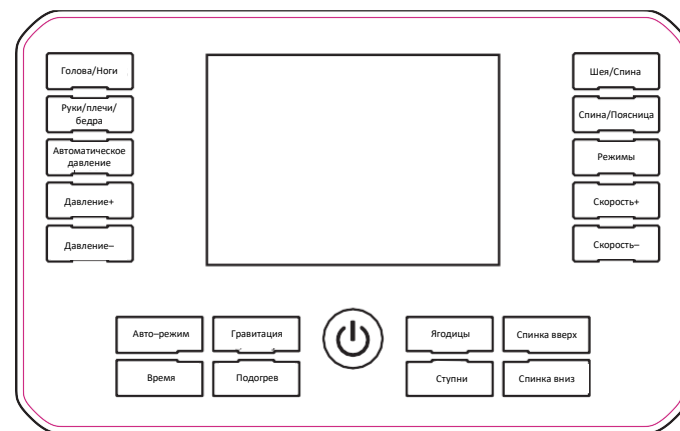

- Вкл/Выкл:** Запуск или остановка. По умолчанию время массажа установлено на 15 минут, затем нажмите для остановки. При выключении кресло автоматически вернется в исходное положение.
- Голова/Ноги:** Включение/выключение функции массажа с воздушной подушкой для головы и ног.
- Руки/Плечи/Бедра:** Включение/выключение функции массажа с воздушной подушкой для рук, плеч и бедер.
- Давление+:** Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, сила массажа с воздушной подушкой увеличивается, максимум до трех уровней.
- Давление-:** Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, сила массажа с воздушной подушкой уменьшается, минимальный уровень.
- Шея/Спина:** Включение/выключение функции разминания затылка.
- Спина/Поясница:** Включение/выключение функции массажа спины.
- Режимы:** Переключение между режимами массажа: вперед и назад.
- Скорость+:** Каждый раз при нажатии увеличивает скорость движения массажной головки, максимально доступно три уровня.
- Скорость-:** Каждый раз при нажатии уменьшает скорость движения массажной головки, минимальный уровень.
- Авто-режим:** Включение/выключение автоматической функции массажа всего тела.
- Время:** Каждый раз при нажатии увеличивает время массажа на 5 минут, максимум до 30 минут. По умолчанию время массажа — 15 минут.
- Гравитация:** Включение режима нулевой гравитации и наклон кресла на 126 градусов (+/- 7) между телом и ногами, затем нажмите, чтобы закрыть кресло в исходное положение.
- Подогрев:** Включение/выключение обогрева талии.
- Ягодицы:** Включение/выключение вибрации бедра или ролика.
- Ступни:** Включение/выключение функции массажа ступней.
- Спина вверх:** Долгое нажатие для подъема спинки кресла (при подъеме движение массажа и воздушный насос останавливаются).
- Спина вниз:** Долгое нажатие для опускания спинки кресла (при опускании движение массажа и воздушный насос останавливаются).

4. Использование без помощи рук

Голосовая команда		Добро пожаловать в использование умного массажа, пожалуйста, попросите Умного стюарда разбудить меня	
		Умный стюард	Добро пожаловать Welcome – "Вэлкэм"
1	Включить / Выключить	Начать массаж	Ok, start massage - "Оукей, старт мѣсаж"
2		Остановить массаж	Ok, stop massage - "Оукей, стап мѣсаж"
3	Авто	Режим один (1)	Yes, Mode one - "Мѳуд ван"
4		Режим два (2)	Yes, Mode two - "Мѳуд ту"
5		Режим три (3)	Yes, Mode three - "Мѳуд фри"
6		Включить ролики	Yes, Roller is on - "Ес, роулер из он"
7		Выключить ролики	Yes, Roller is off - "Ес, роулер из офф"
8	Установить таймер	Увеличить время	Yes, Increase time - "Ес, инкрѣс тайм"
9	Функция нагрева	Включить нагрев	Yes, Heating on - "Ес, хѣтин он"
10		Выключить нагрев	Yes, Heating off - "Ес, хѣтин офф"
11		Поднять спинку	Yes, Backrest up - "Ес, бѣкрѣст ап"
12		Опустить спинку	Yes, Backrest down - "Ес, бѣкрѣст даун"
13		ZERO G	Yes, ZERO G - "Ес, зѣро джи"

IV. Технические параметры

Наименование устройства	Массажное кресло
Номинальное напряжение	110V-240V
Номинальная частота	50-60Hz
Номинальная мощность	90W
Номинальное время работы	15 мин.
Уровень безопасности	Класс I
Стандарт исполнения	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

V. Уход и обслуживание

- 1.Пожалуйста, используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань для чистки, не используйте коррозионные растворители.
- 2.Если шнур питания поврежден, его должен заменить персонал службы обслуживания, назначенный производителем, чтобы избежать опасности.
- 3.При чистке или уходе за продуктом обязательно отключайте питание, чтобы избежать опасности.
- 4.Не используйте острые предметы для очистки продукта.
- 5.Не используйте продукт во влажной среде, используйте его в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- 6.Не нажимайте и не надавливайте на продукт сильно.

VI. Вопросы, требующие внимания

Чтобы обеспечить безопасность и правильное использование массажного кресла, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации и внимательно прочитайте его перед использованием этого продукта:

- 1)Чтобы уменьшить риск пожара, ожогов, электрического шока или травм другим лицам, выполните следующие инструкции:
- 2)Источник питания выше 220V не должен использоваться.
- 3)Когда никто не использует машину, пожалуйста, убедитесь, что вилка питания массажного кресла вынута из розетки. Не используйте машину и не извлекайте вилку устройства/частей, если она находится во включенном состоянии.
- 4)Во избежание пожара, электрического шока или травм, вызванных перегревом, не кладите на продукт одежду, одеяла и другие покрытия.
- 5)Если продукт используется детьми или людьми с ограниченными возможностями, взрослые должны контролировать и направлять их.
- 6)Пожалуйста, убедитесь, что вы используете продукт в соответствии с руководством пользователя. Не используйте детали, не рекомендованные производителем.
- 7)Не используйте этот продукт в случае любого из следующих условий: поврежден шнур питания или штепсель, продукт не работает нормально, он падает на землю или повреждается, или если попадает в воду, пожалуйста, верните продукт в сервисный центр для осмотра и обслуживания.
- 8)Не вытягивайте шнур питания для перемещения продукта или для использования шнура в качестве ручки.
- 9)Держите безопасное расстояние между шнуром питания и нагревательной поверхностью.
- 10)Не используйте продукт, когда воздухозаборник заблокирован. Пожалуйста, держите воздухозаборник незаблокированным, чтобы избежать его блокировки одеждой, волосами и другими вещами.
- 11)Не вставляйте предметы или предметы в какие-либо отверстия на продукте.
- 12)Не используйте этот продукт на открытом воздухе.
- 13)Пожалуйста, не используйте продукт в местах распыления кислорода или при подаче кислорода. Полностью отключите питание, завершите все действия и затем извлеките вилку из розетки.
- 14)Не накрывайте массажное кресло, чтобы избежать поломки из-за чрезмерного накопления тепла.

VII. Защита

- Не используйте массажное кресло в местах с чрезмерно влажной или пыльной средой для предотвращения электрического удара или механического сбоя.
- Не используйте массажное кресло в местах, где температура превышает 40 °C.
- Не размещайте кресло рядом с источниками тепла, такими как камин, обогреватель или прямой солнечный свет.
- Массажное кресло предназначено для личного использования и не подходит для коммерческого использования.